

Navigator™ rendszer

Sebészeti eszközkészlet, amellyel a virtuális sebészeti elképzeléseit a klinikai valóságba ülteti át

Egy tervezési rendszer akkor teljes és hatékony, ha a Navigator System technológiával párosul.



Navigator sebészeti készlet cilindrikus implantátumokhoz SGKIT



Navigator sebészeti készlet kónikus implantátumokhoz SGTIKIT

A **Navigator System laboratóriumi készlet** kompatibilis sebészeti sablon használatával lehetővé teszi a sebészeti beavatkozás előtt mesterminta készítését, amelyben az analógok helyzete pontosan tükrözi az implantátumok elhelyezkedését.

Ezenfelül a protetikai kapcsolatok iránybeállítási rendszerének köszönhetően a sebész a protetikai eljárásokat leegyszerűsítve, klinikai körülmények között ugyanazt az elhelyezkedést reprodukálni tudja.

A Navigator System laboratóriumi készlet elérhető a kónikus és a cilindrikus Navigator System sebészeti készlettel párosítható változatban is.

Minden átmérőhöz / hosszúságban rendelkezésre áll egy sor olyan eszköz, amellyel azonos elhelyezkedésben több implantátumot tartalmazó modell is kialakítható.



A **Navigator System sebészeti készlet** lehetővé teszi a beavatkozást végző orvos számára, hogy a megfelelő sebészeti sablon és a speciális program segítségével olyan implantációs sebészeti eljárást végezzen, mely az adott implantátumok helyzetét a számukra szabványosított, számítógépen programozott eljárás által válassza ki.

A **Navigator System sebészeti készlet** támogatja mind a nyílt szájsebészeti eljárásokat, valamint fogsebészeti eljárásokat is. A **Navigator System sebészeti készlet** implantátum platformként eltérő szinkód jelöléssel rendelkezik és a sebészeti tervezés lépései követése érdekében ergonomikus módon van rendszerezve.

A **Navigator System sebészeti készlet** a **cilindrikus** és a **kónikus** implantátumokhoz megfelelő változatban is elérhető. Ezáltal az orvos az általa előnyben részesített implantátumtípust bármely hosszúságban és átmérővel (kivéve a 6 mm-es átmérőt) használhatja.

A **Navigator System kónikus sebészeti készlet** menetfúró készletet tartalmaz, amely a kemény csontban végzett eljárások hatékonyabb elvégzését szolgálja.

Mindkét készlethez rendelkezésre áll egy **kiegészítő készlet** is a **külső hexagonos** implantátumok alkalmazásához.

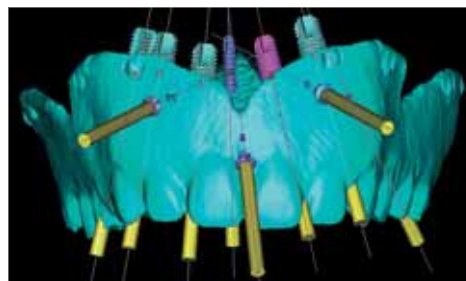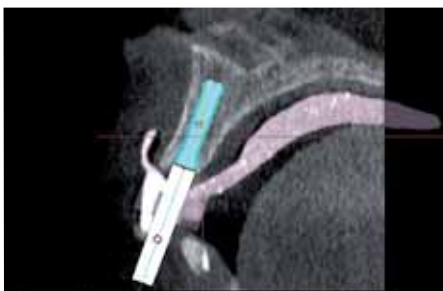

Navigator Cilindrikus mini készlet

HIBRID KITNAV